

Utilisation prévue

Le kit de prélèvement sanguin/perfusion SAFETY est un produit stérile à usage unique. Il se compose d'une aiguille à ailettes de sécurité destinée au prélèvement sanguin et fixée à un tuyau flexible à l'extrémité duquel se trouve un raccord Luer. Le kit de prélèvement sanguin SAFETY est utilisé pour les prélèvements sanguins. Le kit de perfusion SAFETY est utilisé pour le prélèvement de sang et/ou la perfusion brève de liquides intraveineux. L'aiguille à ailettes est pourvue d'une gaine de sécurité destinée à recouvrir l'aiguille immédiatement après son retrait du patient, ce qui représente une importante contribution à la prévention des blessures accidentelles par piqûre d'aiguille.

Description du produit

Le kit de prélèvement sanguin/perfusion SAFETY est un produit stérile à usage unique. Il se compose d'une aiguille à ailettes de sécurité fixée à un tuyau flexible à l'extrémité duquel se trouve un raccord Luer. Différentes combinaisons sont disponibles. Le kit de prélèvement sanguin/perfusion SAFETY est un produit stérile disponible en emballage individuel qui peut être utilisé avec un système Luer (par exemple HOLDEX®). Ce dispositif ne contient ni de caoutchouc naturel sec ni de DEHP (non-DEHP). Ce produit ne doit être utilisé que par des professionnels de la santé ayant reçu une formation appropriée et conformément à ce mode d'emploi.

Kit de prélèvement sanguin/perfusion SAFETY	Produit stérile, disponible en emballage individuel, peut être utilisé avec un système Luer.
Kit de prélèvement sanguin SAFETY avec adaptateur Luer	Produit stérile, disponible en emballage individuel, avec adaptateur Luer (par exemple pour l'utilisation avec le porte-tubes standard).
Kit de prélèvement sanguin SAFETY avec adaptateur Luer + porte-tubes	Produit stérile, disponible en emballage individuel, prêt à l'emploi pour le prélèvement sanguin.
Kit de prélèvement sanguin SAFETY avec HOLDEX®	

Procédure

- Sortez le kit de prélèvement sanguin/perfusion SAFETY de son emballage.
- Assurez-vous que le système de protection à ailettes est solidement fixé au mécanisme de sécurité. REMARQUE : Si l'emballage est déjà ouvert ou endommagé, veuillez jeter le kit de prélèvement sanguin/perfusion et choisir un produit intact.
- Choisissez le site de ponction veineuse. Installez un garrot et préparez le site à l'aide d'une solution antiseptique appropriée. NE PALPEZ PAS le site une fois préparé.

Pour le prélèvement sanguin

- Choisissez le(s) tube(s) et le kit de prélèvement sanguin/perfusion SAFETY appropriés.
- Tenez le kit de prélèvement sanguin/perfusion SAFETY par les ailettes et retirez le bouchon protecteur de l'aiguille avec précaution.
- Procédez à la ponction veineuse en inclinant le bras du patient vers le bas. Si la partie transparente derrière l'aiguille se remplit de sang, la veine a été ponctionnée avec succès.
- Si nécessaire, fixez les ailettes de l'aiguille avec un sparadrap.
- Effectuez le prélèvement.
- Une fois le prélèvement terminé, placez le tampon sur le site de ponction.
- À l'aide de deux doigts, déverrouillez et activez le mécanisme de sécurité en appuyant légèrement des deux côtés du coulisseau de l'aiguille.
- Glissez le coulisseau du mécanisme de sécurité vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ce clic indique que le mécanisme de sécurité a été correctement activé.
- Maintenez la pression sur le tampon stérile au niveau du site de ponction conformément au protocole de l'établissement.
- Après utilisation, éliminez le kit de prélèvement sanguin/perfusion SAFETY immédiatement dans les containers d'élimination prévus à cet effet conformément aux prescriptions en vigueur sur place.

Pour la perfusion intraveineuse de courte durée

Lorsque vous vous apprêtez à faire une perfusion, veuillez retirer de manière aseptisée tous les éléments mâles (HOLDEX®, adaptateur Luer, adaptateur Luer + porte-tubes) avant le raccord au connecteur Luer femelle. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille avec précaution en tenant le kit de perfusion SAFETY par les ailettes, puis préparez le kit conformément aux procédures recommandées.


Volume d'amorçage		
Gauges	Tubes	Volume max.
21G, 23G, 25G	10 cm/4 po	0,28 ml
21G, 23G, 25G	19 cm/7,5 po	0,44 ml
21G, 23G, 25G	30 cm/12 po	0,57 ml

- Pratiquez la ponction veineuse en positionnant le bras du patient vers le bas et veillez à ce que le kit de perfusion soit bien fixé au patient.
- Démarrez la perfusion intraveineuse de courte durée. REMARQUE : Veuillez suivre les procédures de votre établissement. Il est néanmoins recommandé de n'utiliser le dispositif que sur une seule perfusion pendant 5 heures maximum.
- Une fois la perfusion terminée, placez le tampon sur le site de perfusion et terminez la procédure (référez-vous aux points 6 à 10 décrits à la rubrique « Pour le prélèvement sanguin » ci-dessus).



Activation du mécanisme de sécurité (détails)

Une fois le prélèvement sanguin/la perfusion terminé(e), il est recommandé d'activer le mécanisme de sécurité avant de retirer l'aiguille de la veine du patient.

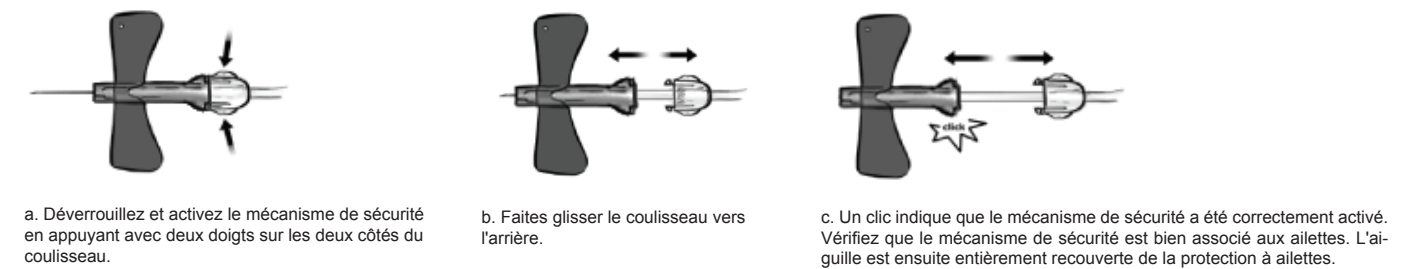

Précautions/Mises en garde

- Le bon fonctionnement de ce dispositif n'est assuré que si les instructions d'utilisation sont respectées.
- N'activez pas prématurément le mécanisme de sécurité ou ne tirez pas violemment sur les ailettes, de telles actions peuvent porter atteinte à l'intégrité du dispositif.
- Vérifiez l'intégrité de l'emballage individuel avant l'utilisation. Si l'emballage présente des déchirures, veuillez ne pas l'utiliser.
- Toute aiguille usagée doit être considérée comme contaminée et doit être jetée dans un conteneur d'élimination d'objets « tranchants » et contaminés conforme immédiatement après utilisation.
- Une fois activé, ne relâchez et ne réactivez jamais par la force le mécanisme de sécurité.
- Gardez toujours les mains à l'arrière de l'aiguille pendant son utilisation et son élimination.
- Ne tordez pas l'aiguille.
- Ce kit n'est pas destiné à un usage sous-cutané.
- Tout échantillon biologique et tout objet « tranchant » de prélèvement sanguin (par exemple lancettes, aiguilles, adaptateurs Luer et kits de prélèvement sanguin) doivent être manipulés conformément aux règles et aux procédures en vigueur au sein de votre établissement.
- Demandez un avis médical approprié en cas d'exposition à des échantillons biologiques (par exemple lors d'une blessure par piqûre d'aiguille) car ceux-ci peuvent transmettre le VIH (SIDA), l'hépatite virale ou d'autres maladies infectieuses.
- La réutilisation du produit peut entraîner des infections dangereuses pour la santé, des blessures voire même la mort.
- Pour l'élimination des kits de prélèvement sanguin de sécurité et des kits de prélèvement sanguin associés au porte-tubes usagés, servez-vous des containers d'élimination prévus à cet effet.
- Portez en permanence des gants lors de la ponction veineuse pour réduire le risque d'exposition.
- Évitez les fuites de sang et la pénétration d'air dans le tube au cours de la perfusion.
- Une attention particulière s'impose lors de l'utilisation sur des femmes enceintes ou allaitantes et des enfants.
- Dans le cas de patients immobilisés, hémophiles, épileptiques, etc., une attention particulière s'impose lors du prélèvement sanguin.
- En raison du risque de contamination de surface consécutive aux gouttes de sang tombant de l'extrémité de l'aiguille usagée, celle-ci doit être orientée vers le haut au moment de son élimination.
- Ne recouvrez pas le mécanisme de sécurité d'adhésif.
- N'essayez pas de manipuler le mécanisme de sécurité après son activation.
- Au moment de l'amorçage, vérifiez l'absence totale d'air dans le cadre d'une utilisation du dispositif pour une perfusion intraveineuse de courte durée.

Stockage des kits de prélèvement sanguin/perfusion SAFETY avant l'utilisation

Température de stockage conseillée : entre 4 et 36 °C (entre 40 et 96,8 °F).  
REMARQUE : Évitez le contact direct avec la lumière du soleil. Le dépassement de la température maximale de stockage conseillée peut porter atteinte à la qualité des kits de prélèvement sanguin/perfusion SAFETY.

Informations sur l'étiquette :

	Numéro du produit		Symbole « Dispositif à usage unique »	<b>Documentation :</b>  CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition
	Numéro de lot		Limites de température	
	Date de péremption : Le produit peut être utilisé jusqu'à la fin du mois indiqué		Fabricant	
	Symbole de « Stérilisation à l'oxyde d'éthylène »			

